

*GLOBAL-IDENT™*  
*Global-scan™*

Gyv namų implantuotų mikrolustų skaitytuvas

*Global-scan™*  
GS 110

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### Žangas

Sveikiname sigijus *Global-scan™*. Šis skaitytuvas gali perskaityti visus FDX-B, HDX ir FDX-A mikrolustinius tarpus, kurie plačiai naudojami naminių gyvūnų tapatybės nustatymui, perduodama informacija.


Kaip matote, gamina naudoti paprasta.

### Renkamas kalb

Laikydami *Global-scan™*, palaikykite nuspaudus (ilgiau kaip 5 sek.) skaitymo mygtuką, esant kairiajame skaitytuvo šone. Skaitytuvas vienu po kitos parodys varias kalbas: English, Français, Español, Italiano, Portugues, Deutsch, Polski. Daugiau informacijos rasite skyrelyje „Pirmą kartą nustatant skaitytuvo parametrus“.


### Siųstuvo-imituoto duomenų skaitymas

Paspaudus skaitymo mygtuką (apie 1 sek.), junkite skaitytuvą. Ekrane trumpai matysite vartotojo pasirinktą kalbą, o tuomet pasirodys toks pranešimas:

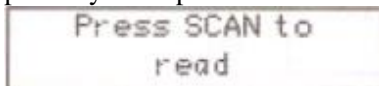

Press SCAN to  
read

Paspaudus skaitymo mygtuką dar kartą, skaitytuvas pradeda ieškoti mikrolusto. Ekrane matysite tokį pranešimą:

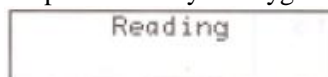


Reading

Skaitytuvą laikydami rankoje, priartinkite jo anteną prie gyvūno kūno. Laikydami plotą, kur turi būti mikrolustas, skaitytuvą laikydami per kelis centimetrus nuo gyvūno odos. Skaitytuvas skenuoja apie 20 sek. Skaitytuvui baigus ieškoti, galimos dvi situacijos.

- Pirmasis atvejis:

Jei mikrolustas buvo aptiktas, skaitytuvas pypteli ir parodo unikalų identifikacinį kodą:

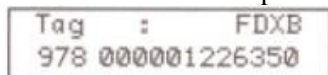

Tag : FDXB  
978 000001226350


Šia pateiktame pavyzdyje skaitytuvas rodo, kad aptiktas FDX-B lustas.

Identifikacinis kodas ekrane rodomas apie 2 min., o tuomet skaitytuvas automatiškai išsijungia. Jei skaitymo mygtuką paspausite, kai kodas teberodomas ekrane, vėl prasidės skaitymas.

Dėmesio: Skaitytuvą išjungus, pastarąjį priimtą identifikacinį kodą dar kartą pamatyti nebebus manoma.

- Antrasis atvejis:

Jei mikrolustas per 20 sek. nebuvo aptiktas, skaitytuvas triskart pypteli ir ekrane parodo tokį pranešimą:

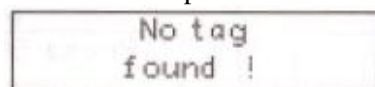


No tag  
found !

Tokiu atveju m ginkite mikrolust surasti dar kart . Tam skaitytuv reikia v l paleisti paspaudus mygtuk . Plot , kuriame tur t b ti mikrolostas, patikrinkite kuo platesniais mostais. Jei reikia, operacij pakartokite paleid skaitytuv dar kart .

## Kei iame baterij

**Naudokite tik PP3 tipo 9 V šarmines baterijas arba kraunamas baterijas.** Baterijai senkant, skaitytuvas dukart pypteli ir ekrane reguliariai rodo tok pranešim :

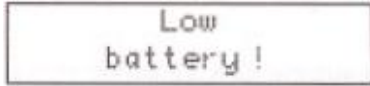

Baterijai visiškai išsekus, skaitytuvas parodo š pranešim ir iškart išsijungia. Nor dami pakeisti baterij , atidarykite skaitytuvo apa ioje esant baterij skyrel ir sen baterij pakeiskite nauja. Uždarykite baterij skyrel ir patikrinkite, ar dangtelis gerai užsifiksavo.

## Bluetooth (papildomas priedas)

*Bluetooth* leidžia be laido susisiekti su valdan iuoju prietaisu (kompiuteriu, delninuku ir pan.).

Vidin *Bluetooth* modul galima išjungti *Bluetooth* jungimo ir išjungimo jungikl past mus aukštyn. Ši pad tis rekomenduojama, kad baterijos ne taip greit išsekt .

## Technin s specifikacijos

**Standartai:** ISO 11784 / 11785

**Matmenys:** 15 × 8 × 3,5 cm (ilgis, plotis, aukštis)

**Svoris:** 155 gramai arba 5,5 uncijos (su baterija)

**Maitinimas:** standartin 9 volt PP3 šarmin baterija arba kraunama PP3 NiMH baterija

**Nuoseklioji s saja:** RS232 9600/N/8/1 (tik Tx)

**Skaitymo atstumai (priklauso nuo mikrolusto gamintojo):**

FDX-B: iki 10 cm (4 coli )

FDX-A: iki 5 cm (2 coli )

HDX: iki 20 cm (7,8 coli ; aus sagas)

**Priedai:** *Bluetooth* (10 m)

**Temperat ra:** nuo -10°C iki +55°C

Suprojektuota Pranc zijoje

Pagaminta Kinijoje

Šis gaminy s *Global-scan*<sup>TM</sup> GS110 atitinka pagrindinius R&TTE direktyvos 1999/5/EB reikalavimus. Atitikties deklaracijos kopij rasite adresu <http://www.global-ident.fr>.

Perbrauktas konteineris su ratukais reiškia, kad nebenaudojam gamin Europos S jungoje reikia pristatyti tam skirt toki atliek surinkimo punkt . Nemeskite ši gamini ner šiuojamas buitines atliekas.

*Bluetooth* – registruotas *Bluetooth SIG Inc.* prek s ženklas.

## *Global-scan* funkcijos

Pranešimai gali b ti rodomi angliškai, pranc ziškai, ispaniškai, itališkai, portugališkai, vokiškai arba lenkiškai.

Skaitytuvo atmintyje galima išsaugoti iki 800 anks iau iš si stuvo-imtuvo priimt kod .

*Global-scan*<sup>TM</sup> gali priimti duomenis iš tokios r šies si stuv -imtuv : FDX-B (*Hitag, Zodiac* ir kt.), FDX-A (*Destron, Avid, FECAVA*), HDX (*Tiris*).

*Global-scan*<sup>TM</sup> turi vienkrypt nuosekli j s saj RS232 (tik Tx).

## Pirm kart nustatant skaitytuvo parametrus

K tik sigijote *Global-scan*<sup>TM</sup>, bet prieš naudodami turite nustatyti parametrus, kad šie atitikt J s poreikius.

Penkias sekundes **palaikykite nuspaud** skaitymo mygtuk , esant kairiajame skaitytuvo šone. Vienas po kito parodomi tokie pranešimai:

Ir taip toliau vienas po kito:

English – Français – Español – Italiano – Portugues – Deutsch – Polski

Jei rodomas „-“, vadinasi atminties funkcija n ra jungta.

Jei rodomas „+“, vadinasi atminties funkcija yra jungta.

Ekrane pamat pasirinkt kalb ir veikimo režim , skaitymo mygtuk atleiskite. *Global-scan*<sup>TM</sup> pypteli parodydamas, kad jo parametrai nustatyti ir galima prad ti skaitym .

#### **Pastaba:**

1. Konfig racija išsaugoma skaitytuvo atmintyje. Taigi kiekvien kart j jungus, kalba ir veikimo režimas (su veikian ia arba neveikian ia atmintimi) bus tas pats.
2. Atsargiai! jungdami nelaikykite skaitymo mygtuko nuspaud ilgiau kaip 2 sek. Kitaip galite jungti parametr nustatymo meniu.

#### **Kei iame konfig racij**

Nor dami pakeisti parametrus, skaitytuv išjunkite (jei reikia) ir v l junkite laikydami skaitymo mygtuk nuspaud tol, kol pamatysite norim konfig racij .

#### ***Global-scan* išjungimas**

*Global-scan*<sup>TM</sup> užprogramuotas automatiškai išsijungti po 2 minu i , jei per t laik nepaspaudžiamas skaitymo mygtukas. Skaitytuv galima išjungti ir palaikius skaitymo mygtuk nuspaust , kai ekrane rodomas identifikacinis kodas arba pranešimas „no tag found“.

#### **Naudojame atminties funkcij**

Skaitytuvui nustatius veikimo režim su atmintimi „+ memory“, iš si stuvo-imituvo priimami kodai bus išsaugoti (ne daugiau kaip 800 identifikacini kod ).

Nor dami perduoti atminties turin , atlikite tokias operacijas:

- Jei skaitytuvas išjungtas, junkite j . Ekrane iš eil s pamatysite toliau parodyt meniu.
- Jei skaitytuvas jau jungtas, spustel kite skaitymo mygtuk ir, kol iš si stuvo-imituvo priimami duomenys, 2 sek. laikykite skaitymo mygtuk nuspaust . Pamatysite tok meniu:

Persp jimas: Po siuntimo etapo nepamirškite atmint išvalyti.

#### **Garantijos laikotarpis**

Skaitytuvui suteikiama 12 m nesi garantija nuo pardavimo datos d l vis šio gaminio defekt , susijusi su prastomis medžiagomis arba prasta darbo kokybe. Garantija neapima žalos, atsiradusios d l nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo, modifikacij arba naudojimo ne pagal šioje instrukcijoje nurodyt paskirt , kuriai prietaisas buvo sukurtas.